

UNE AVANCÉE  
**REMARQUABLE DANS LE TRAITEMENT**  
DES CLASSES III



**LE TOUT NOUVEL APPAREIL**  
**CARRIERE® MOTION™** POUR CLASSES III

L'appareil *Carriere Motion* pour Classe III est une nouvelle solution pour le traitement des Classes III, remarquablement facile à utiliser et douce pour le patient. Cet appareil discret et confortable se colle directement en quelques minutes et est aussi facilement toléré que des élastiques seuls ! Imaginez un appareil qui vous donne – et à vos patients de Classe III – une option sans chirurgie ni dispositif extra-oral encombrant, inconfortable et inesthétique. Si vous vous êtes déjà battu contre des cas de Classe III, regardez le tout nouvel appareil *Motion* pour Classes III !

Plus d'information sur l'appareil *Motion* Classe III au **888.851.0533** ou sur **HenryScheinOrtho.com**

Avant traitement



En traitement



Après traitement



 **HENRY SCHEIN®**  
ORTHODONTICS

*The New Movement In Orthodontics™*

# APPAREIL CARRIÈRE MOTION POUR CLASSE III

L'appareil *Motion* Classe III est un appareil à invasion minimum destiné à traiter les malocclusions de Classe III sans extractions, sans chirurgie orthognathique douloureuse, ni masque facial notoirement inconfortable et inesthétique. L'appareil *Motion* Classe III est aussi facile à mettre en place qu'un bracket ou un tube molaire. Il est conçu pour donner des résultats prédictibles et un profil harmonieux et équilibré, tout en préservant les traits naturels du patient. L'appareil, doux pour le patient, est utilisé en début de traitement, avant les brackets ou les gouttières d'alignement. Il effectue une correction antéro-postérieure rapide pour contribuer à réduire de plusieurs mois le temps total de traitement. Des élastiques intra-oraux connectent l'appareil à un ancrage maxillaire pour activer le segment mandibulaire postérieur et le déplacer en bloc vers une occlusion idéale de Classe I. Une fois la plateforme idéale obtenue, des brackets ou des gouttières sont alors placés pour finir le cas.



*Conçu pour donner des résultats prédictibles et créer un profil harmonieux et équilibré.*

KITS		RÉFÉRENCES	
Kit Standard Motion Classe III (1 jeu de chaque 23, 25, 27 mm)		424-407C	
DESCRIPTION/TAILLE	CODE COULEUR	RÉFÉRENCES 1 paire	RÉFÉRENCES UNE PIÈCE (UNIVERSEL G/D)
<i>Motion</i> Classe III 16 mm	Blanc	424-416C	424-416
<i>Motion</i> Classe III 18 mm	Bleu	424-418C	424-418
<i>Motion</i> Classe III 20 mm	Rose	424-420C	424-420
<i>Motion</i> Classe III 23 mm	Jaune	424-423C	424-423
<i>Motion</i> Classe III 25 mm	Rouge	424-425C	424-425
<i>Motion</i> Classe III 27 mm	Vert	424-427C	424-427
ACCESSOIRES			
Typodont Motion Classe III avec gouttières transparentes	-	-	631-033DNE
Typodont Motion Classe III en malocclusion avec gouttières transparentes	-	-	631-034DNE
Motion Classe III Modèle de démonstration X5	-	-	631-433X
Élastiques Motion - Force 1, 1/4", 6 oz (50 paquets de 100 élastiques)	-	-	424-9F1
Élastiques Motion - Force 2, 3/16", 8 oz (50 paquets de 100 élastiques)	-	-	424-9F2



Rejoignez nous : <https://www.facebook.com/orthoplusfr>

## Orthoplus SAS


28, rue Ampère - BP 28  
91430 Igny - France  
Tél. +33 (0)1 69 41 90 28  
Fax +33 (0)1 60 19 32 22

Pour commander par email :  
[orthoplus@orthoplus.fr](mailto:orthoplus@orthoplus.fr)

Dispositif médical de Classe II A - Réserve aux professionnels - Non remboursé par les organismes d'assurance de santé. Merci de respecter les conditions d'utilisation présentes sur l'étiquette.

© 2014 Ortho Organizers, Inc. Tous droits réservés. PN 999-287 05/14

Les marques déposées et marques commerciales sont la propriété de leur(s) société(s) respective(s).  
Brevet U.S. No. 7,621,743, et brevets étrangers Nos 2,547,433, 1723927, et 2006202089.

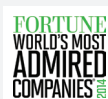

Produit d'  HENRY SCHEIN®  
ORTHODONTICS

The New Movement In Orthodontics™



Distribué par

**orthoplus**®  
préparons l'avenir



Ortho Organizers, Inc.  
1822 Aston Ave.  
Carlsbad, CA 92008 USA